



Silikonprodukte

Therapiekonzept für eine
gezielte Versorgung



Juzo ScarComfort Pure Kompressionsärmel
mit eingenähtem Juzo Silon®-TEX

Silikonprodukte

Juzo Silon®-TEX und Juzo ScarPad

Narben sind die Folge von Verletzungen oder chirurgischen Eingriffen, aber auch das Ergebnis eines Wundheilungsprozesses. Ein wichtiger Baustein in der Behandlung von pathologischen Narben ist die Verwendung von Silikon, auch in Kombination mit Kompressionsbekleidung.

Silikon

Medizinisches Silikon lässt auf der Narbe ein feuchtes Milieu entstehen, wodurch die Narbe nicht austrocknet. Es hält die Narbe weich und hat einen positiven Effekt auf das Narbengewebe.

Kombination von Silikon und Kompression

Die ideale Kombination in der Therapie von Narben bilden Silikon und Kompression. Auf den geschlossenen Wundbereich wird durch die Kompressionsversorgung zusätzlich zum Silikon ein therapeutisch wirksamer Druck ausgeübt. So kann einem ungeordneten und übermäßigen Bindegewebsumbau entgegen gewirkt werden. Die Verbindung aus konstantem Oberflächendruck der Kompressionsbekleidung zusammen mit Silikon beeinflusst die Heilung des Narbenareals positiv.

- **Juzo Silon®-TEX** ist ein textiles Trägermaterial mit aufgebrachter Silikonschicht. Dieses wird direkt in die Juzo Kompressionsbekleidung eingenäht.
- **Juzo ScarPad** Silikonauflagen sind selbsthaftend, individuell zuschneidbar und können direkt auf die Haut aufgelegt werden. Darüber kann die Juzo Kompressionsbekleidung getragen werden.

Indikationen

- Schädigung der Haut und Heilfunktion der Haut mit hypertropher Narbenbildung oder Keloidbildung
- Nach Verletzungen / Verbrennungen / Operationen
- Zur Prävention bei Neigung zur Bildung von Keloiden und hypertrophen Narben



Juzo Silon®-TEX

Medizinische Silikonschicht auf textilem Trägermaterial

Juzo Silon®-TEX ist ein weiches und anschmiegsames textiles Trägermaterial, auf das eine dünne medizinische Silikonschicht aufgebracht ist. Es ist bei den verschiedensten aktiven Narbenarten einsetzbar und wird individuell direkt in die flachgestrickten Kompressionsprodukte Juzo ScarComfort Fine, Juzo ScarComfort Pure und Juzo ScarComfort Silver eingenäht.

- + 100 % medizinisches Silikon
- + Permanente Einarbeitung
in die Kompressionsbekleidung
- + Verschiedene Größen möglich
(nur rechteckig und bis zu 50 % des
Umfangs können versorgt werden)
- + Dauerhafte Wirkung
- + Weich und angenehm
- + UV-Schutzfaktor UPF 80 durch
die Kompressionsbekleidung
- + Waschbar


Richtige Anwendung

Zunächst muss die Narbe und die umgebende Haut gründlich gesäubert werden. Das Narbengewebe sollte fettfrei und trocken gehalten werden. Anschließend kann die Juzo Kompressionsbekleidung mit eingenähtem Juzo Silon®-TEX angezogen werden. Für leichteres Anziehen sollte die Juzo Kompressionsbekleidung nach Möglichkeit zuerst auf links gewendet werden und anschließend nach und nach über die Extremität modelliert werden – so wendet sich das Produkt gleichzeitig wieder auf rechts. Die Juzo Kompressionsbekleidung sollte konsequent am Tag und in der Nacht getragen werden. Um Hygiene und Materialregeneration zu gewährleisten, sollte die Kompressionsbekleidung täglich gewaschen werden. Idealerweise liegt die Juzo Kompressionsversorgung mit Juzo Silon®-TEX in mehrfacher Ausführung als Wechselversorgung vor.

Kombination von Kompression mit Silikon

Medizinische Silikonschicht auf textilem Trägermaterial

Das Textilgewebe ist weich und angenehm und passt sich der Anatomie perfekt an. Das Gewebe ist sehr dünn und dauerhaft mit einer Schicht aus medizinischem Silikon verbunden. Die Silikonschicht lässt auf der Narbe ein feuchtes Milieu entstehen und trocknet diese somit nicht aus. Das medizinische Silikon ist weich und dank der halbdurchlässigen Membranen atmungsaktiv für optimalen Tragekomfort.

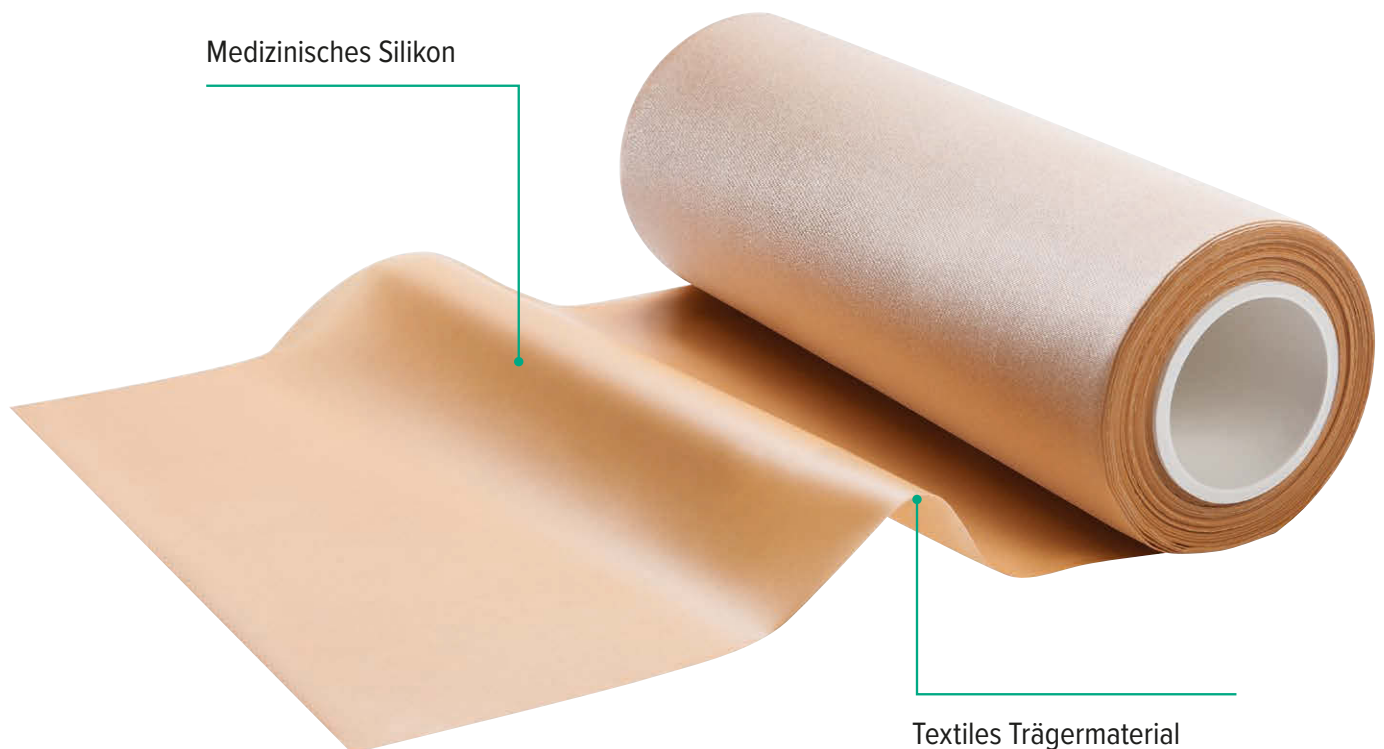

Juzo Silon®-TEX ist lose nicht erhältlich.

Juzo ScarComfort Gestricke mit Juzo Silon®-TEX

Das Juzo Silon®-TEX ermöglicht eine individuelle Einarbeitung in die Juzo Kompressionsbekleidung je nach Wunsch und Größe. Somit ist der Einsatz nahezu am ganzen Körper möglich. Zusätzlich zum Silikon ist ein therapeutisch wirksamer Druck hilfreich für das Narbenareal um einem ungeordneten und übermäßigen Bindegewebsumbau entgegenzuwirken. Die Juzo Kompressionsbekleidung mit Juzo Silon®-TEX muss täglich gemäß der Pflegesymbole auf dem eingenähten Textiletikett gereinigt werden.

- Bestellung** ☐ Nur Kostenvoranschlag



Juzo
Scar Management

Narbenmanagement

☒ Linker Arm
☐ Rechter Arm
 Umfangmaße (c) in cm

CH⁺

Längenmaße (l) in cm

PCG 48

CG 30

PCF 37 28 cF

Diagram of a horizontal beam of length 15 m. The beam is supported by a pin at the left end and a roller at the right end. A triangular load is applied, starting at 0 kN/m at the left end and increasing linearly to 24 kN/m at the right end. The load is represented by a green triangle above the beam.

Diagram showing the vertical distance between the center of gravity (CG) and the center of pressure (CP) for a submerged vertical surface. The distance is labeled as 6 cm. The CG is marked with a blue '17' and the CP with a blue '18'.

Anmerkungen (in Druckbuchstaben)

mit Juzo Silon®-TEX am Oberarm rechts,

ab cG 15 cm lang, semizirkulär Richtung cE
an Armaußenseite eingearbeitet

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

dass die rechtskonforme Einwilligung zur Weitergabe und Verarbeitung der Daten von dem betroffenen Patienten zuvor eingeholt worden ist. Soweit eine Ablehnung vorliegt, ist die Einwilligung des Patienten zu belegen.

den Grundsatzes der Datensparsamkeit empfehlen wir, lediglich

Anmerkungen (in Druckbuchstaben):

mit Juzo Silon®-TEX am Oberarm rechts,
ab cQ 15 cm lang, semizirkulär Richtung cE
an Armaußenseite eingearbeitet

[illegible]

.....

.....



ant (an der Schule)

Individuelle Sonderausstattungen

☐ Anatomisch abgewinkelte Form bei „cE“ 30° ☐ 50°

☐ Naht an der Armaußenseite

Anmerkungen detailliert beschreiben und ggf. mit Fotos dokumentieren²⁾

Größe 15 x 10 cm (Länge x Breite, nur rechteckig möglich und bis zu 50 % des Umfangs können versorgt)

☐ Reißverschluss ☐ Außen aufgenäht

Länge cm

Position _____

gearbeitete Tasche für Pelotte (genaue Po

☐ Silver

Fotodokumentation bei schwierigen anatomischen Gegebenheiten

*Aufgrund des datenschutzrechtlichen Grundsatzes der Datensparsamkeit empfehlen wir, lediglich eine Fotodokumentation bei schwierigen anatomischen Gegebenheiten zu übersenden. Im Fall der Möglichkeit der Zusammenführbarkeit der Daten (Angabe des Klarnamens statt Kommission), bestätigt die bestellende Firma, dass die rechtskonforme Einwilligung zur Weitergabe und Verarbeitung der Daten von dem betroffenen Patienten eingeholt worden ist.



Juzo ScarPad

Silikonauflagen

Die speziellen Juzo ScarPad Silikonauflagen sind bei den verschiedensten aktiven Narbenarten in Kombination mit Kompression einsetzbar. Für die wirksame und individuelle Behandlung sind diese in verschiedenen Größen und Varianten erhältlich.

- + 100 % medizinisches Silikon
- + Weich, angenehm und unauffällig
- + Individuell zuschneidbar
- + UV-Schutzfaktor UPF 50
- + Perfekte Anpassungsfähigkeit
- + In verschiedenen Größen und Varianten erhältlich
- + Selbsthaftend und flexibel einsetzbar
- + Waschbar und wiederverwendbar



Richtige Anwendung

Zunächst muss die Narbe und die umgebende Haut gründlich gesäubert werden. Das Narbengewebe sollte fettfrei und trocken gehalten werden. Das Juzo ScarPad muss nun auf die gewünschte Form (Ecken abrunden) zugeschnitten werden. Nach dem Entfernen der Schutzfolie kann die Silikonaufgabe direkt auf die Narbe aufgebracht werden. Idealerweise sollte das Juzo ScarPad etwa 2 cm über die Narbe hinaus abdecken. Anschließend sollte die Juzo Kompressionsbekleidung darüber angezogen werden. Um Hygiene und die selbsthaftende Eigenschaft zu gewährleisten, muss das Juzo ScarPad täglich mit der Juzo ScarPad Cleaning Soap gereinigt werden.

Juzo ScarPad Light small und Light

- + Prävention und Therapie flacher Narben
- + Besonders geeignet für Hand, Finger und Gesicht
- + Zuschneidbar auf jede beliebige Größe und Form

Juzo ScarPad Light small

Art.	9414
Stärke	0,4 mm
Größe	5 x 8 cm (2 Stück je Packung)
PZN	12141786

Juzo ScarPad Light

Art.	9410
Stärke	0,4 mm
Größe	10 x 14 cm (2 Stück je Packung)
PZN	09886726

Juzo ScarPad Extra und Strong

- + Prävention und Therapie stark erhabener sowie großflächiger Narben
- + Besonders geeignet für Thorax und Extremitäten
- + Zuschneidbar auf jede beliebige Größe und Form

Juzo ScarPad Extra

Art.	9411
Stärke	1,4 mm
Größe	10 x 14 cm (1 Stück je Packung)
PZN	09886732

Juzo ScarPad Strong

Art.	9412
Stärke	2,3 mm
Größe	14 x 22 cm (1 Stück je Packung)
PZN	11027433


Alle Juzo ScarPad Produkte sind inkl. Juzo ScarPad Cleaning Soap für die tägliche Reinigung.



Anwendungsdauer

Juzo ScarPad Silikonauflagen

Je nach Schweregrad der Narben kann es zum Teil zu längeren Behandlungszeiträumen kommen. Am ersten Tag der Anwendung sollten die ScarPad Produkte nur für ca. drei Stunden aufgebracht werden. Anschließend sollte die Tragezeit täglich um eine Stunde verlängert werden. Die Juzo ScarPad Produkte können bis zu 23 Stunden pro Tag getragen werden. Die Anwendung erfolgt individuell so lange, bis die Narbe weich, blass und flacher geworden ist. Bei sachgemäßer Anwendung ermöglicht eine Verpackungseinheit der Juzo ScarPad Produkte eine Anwendungsdauer von vier bis acht Wochen.

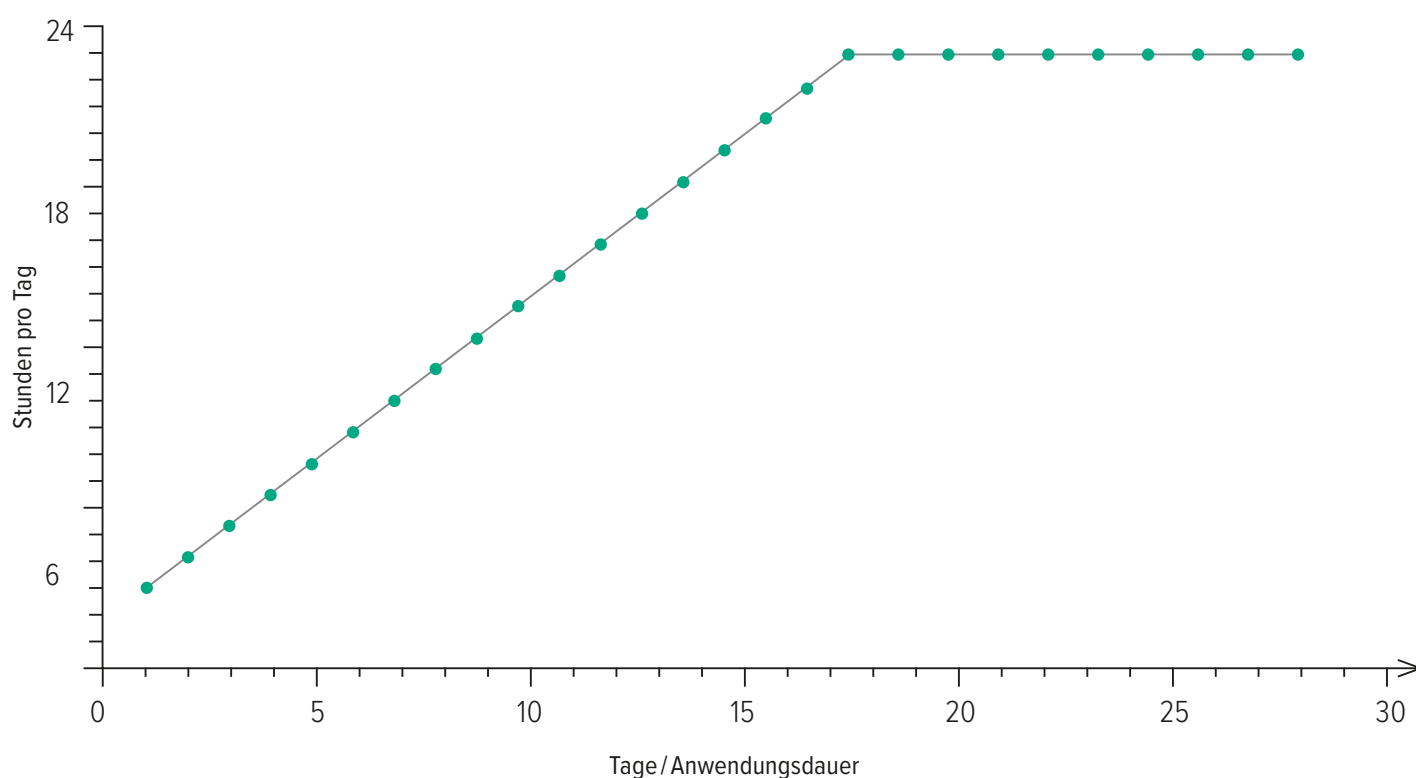

Juzo Kundenservice

DE · Tel.: +49 (0)8251 901 0 · Fax: 0800 08 35 393 · E-Mail: scar@juzo.de

AT + CH · Tel.: +49 (0)8251 901 300 · Fax: +49 (0)8251 901 321 · E-Mail: order@juzo.at · E-Mail: order@juzo.ch

